



発売

株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020 (フリーコール)

[製造販売一覧]

昭和薬品化工株式会社 東京都中央区京橋二丁目17番11号 〒104-0031
有限会社ウィルデント 大阪府大阪市北区菅原町10-32 DAIXビル7階 〒530-0046
株式会社フードケア 神奈川県相模原市緑区橋本4-19-16 OMGビル 〒252-0143
マニー株式会社 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3 〒321-3231
ライカマイクロシステムズ株式会社 東京都新宿区高田馬場1-29-9 〒169-0075
ニプロ株式会社 大阪府大阪市北区本庄西3-9-3 〒531-8510
サンメディカル株式会社 滋賀県守山市古高町571-2 〒524-0044
株式会社YDM 埼玉県東松山市今泉28 〒355-0042
フェザー安全剃刀株式会社 東京都中央区日本橋浜町1-2-2 〒103-0007
城田電気炉材株式会社 東京都中野区若宮2-55-3 〒165-0033
ビエン・エア・アジア株式会社 東京都豊島区池袋 2-40-12 西池袋第一生命ビルディング 10F 〒171-0014
クラレノリタケデンタル株式会社 新潟県胎内市倉敷町2-28 〒959-2653
株式会社ニッシン 京都府亀岡市旭町樋ノ口88 〒621-0001
株式会社變化デンタル 茨城県稲敷郡阿見町岡崎3-20-15 〒300-0312
株式会社ケディカ 宮城県仙台市泉区明通3-20 〒981-3206
株式会社モリタ 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650
株式会社モリタ製作所 京都府京都市伏見区東浜南町680 〒612-8533
株式会社モリタ東京製作所 埼玉県北足立郡伊奈町小室712 〒362-0806

Morita Global Site: www.morita.com
More Infos about Products: www.dental-plaza.com

- 標準価格の後の数字は品目コードです。
- 掲載商品の標準価格は、2022年4月1日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
- 仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
- ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。
- ディーラーによっては一部の掲載商品はお取扱いできない場合がございます。
- 商品の取り扱い状況に関してはお問い合わせください。
- 令和4年度診療報酬改定に関連した商品を掲載しておりますが、すべての品目が診療報酬改定に即した対象品ではございません。

PUB.NO M6818.1.2204.10.000SL.IO/ZU 208530171

2022年4月 診療報酬改定関連製品セレクション

Thinking ahead. Focused on life.

2022年4月診療報酬改定の主な改正内容(抜粋)

項目	処置名	旧点数	新点数	
基本診療料	歯科初診料	初診料	261点 ▶ 264点	
		歯科診療特別対応連携加算	100点 ▶ 150点	
		電子的保険医療情報活用加算(月1回)	— ▶ 7点	
	歯科再診料	再診料	53点 ▶ 56点	
電子的保険医療情報活用加算(月1回)		— ▶ 4点		
医学管理等	歯科疾患管理料(13歳未満→16歳未満)	フッ化物洗口指導加算	100点 ▶ 100点	
		総合医療管理加算	40点 ▶ 40点	
		総合医療管理加算	50点 ▶ 50点	
		総合医療管理加算	100点 ▶ 100点	
在宅医療 周術期医療 リハビリテーション	小児口腔機能管理料(15歳未満→18歳未満)	小児口腔機能管理料	100点 ▶ 100点	
		在宅医療	100点 ▶ 100点	
		歯科訪問診療料 診療時間が20分未満の場合	770点 ▶ 880点	
		歯科訪問診療2	253点 ▶ 253点	
		歯科訪問診療3	130点 ▶ 111点	
		在宅療養支援歯科診療所1	320点 ▶ 340点	
	在宅療養支援歯科診療所	在宅療養支援歯科診療所2	250点 ▶ 230点	
		在宅患者歯科治療時医療管理料(歯周基本治療時も適用)	45点 ▶ 45点	
		救急搬送診療料	1,300点 ▶ 1,300点	
		*重症患者搬送加算	— ▶ 1,800点	
	在宅療養支援歯科診療所	在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料	10歳未満 350点 ▶ 400点	
		(摂食機能障害を有し→摂食機能障害又は口腔機能低下症を有し)	10歳以上20歳未満 450点 ▶ 500点	
		20歳以上 550点 ▶ 600点		
		在宅療養支援歯科診療所加算1	125点 ▶ 145点	
		在宅療養支援歯科診療所加算2	100点 ▶ 80点	
		小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(15歳未満→18歳未満 条件有)	450点 ▶ 600点	
	周術期医療	在宅患者等専門的口腔衛生処置(1口腔内につき)	120点 ▶ 130点	
フッ化物歯面塗布処置(在宅等療養患者の場合→初期の根面う蝕に罹患している患者の場合)		110点 ▶ 110点		
周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔内につき)		92点 ▶ 100点		
周術期等専門的口腔衛生処置2		100点 ▶ 110点		
週1回に限り一律加算		200点 ▶ —		
摂食嚥下機能回復体制加算1		— ▶ 210点		
摂食嚥下機能回復体制加算2		— ▶ 190点		
摂食嚥下機能回復体制加算3		— ▶ 120点		
リハビリテーション	摂食機能療法	1枚目	— ▶ 58点	
		症確	— ▶ 48点	
	歯髓温存療法	188点 ▶ 190点		
	直接歯髓保護処置	150点 ▶ 152点		
	間接歯髓保護処置	34点 ▶ 36点		
	抜髄(1歯につき)	単根管	230点 ▶ 232点	
		2根管	422点 ▶ 424点	
		3根管以上	596点 ▶ 598点	
	感染根管処置(1歯につき)	単根管	156点 ▶ 158点	
		2根管	306点 ▶ 308点	
		3根管以上	446点 ▶ 448点	
	根管粘着処置(1歯につき)	単根管	30点 ▶ 32点	
		2根管	38点 ▶ 40点	
		3根管以上	54点 ▶ 56点	
	加圧根管充填処置(1歯につき)	単根管	136点 ▶ 138点	
		2根管	164点 ▶ 166点	
		3根管以上	208点 ▶ 210点	
	従来の算定要件に「複雑な解剖学的根管形態等の確認」が追加された	手術用顕微鏡加算(CBCTと併用の場合)	400点 ▶ 400点	
		上記の場合Ni-Tiロータリーファイル加算	— ▶ 150点	
		かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算	— ▶ 120点	
歯周病安定期治療	歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき)	42点 ▶ 48点		
機械的歯面清掃処置	著しく困難なもの	70点 ▶ 80点		
	70点 ▶ 72点			
手術	拔牙手術	前歯	155点 ▶ 160点	
		臼歯	265点 ▶ 270点	
		埋伏歯	1,054点 ▶ 1,080点	
		歯肉弁根尖側移動術	600点 ▶ 770点	
歯周外科手術 歯肉歯槽粘膜形成手術	歯肉弁歯冠側移動術	600点 ▶ 770点		
	歯肉弁歯冠側移動術	490点 ▶ 490点		
	接着冠形成加算	— ▶ 490点		
歯冠修復 及び 欠損補綴	歯冠形成(1歯につき)	レジン前装チタン冠が追加された	—	
		接着冠形成加算	— ▶ 490点	
		大白歯	176点 ▶ 196点	
	支台構築(1歯につき)	1 間接法 ファイバーポストを用いた場合	小白歯	150点 ▶ 170点
		2 直接法 ファイバーポストを用いた場合	大白歯	154点 ▶ 174点
	デンポラリークラウン リテーナー	装着(CAD/CAMインレーが追加された) 内面処理加算1	小白歯	128点 ▶ 148点
			34点 ▶ 34点	
		広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)	— ▶ 300点	
		CAD/CAM冠, CAD/CAMインレー	45点 ▶ 45点	
		高強度硬質レジンブリッジ	90点 ▶ 90点	
金属歯冠修復 チタン冠(1歯につき)		前歯	— ▶ 1,200点	
		接着冠(1歯につき)	前歯 — ▶ 370点	
根面被覆(1歯につき)		臼歯	— ▶ 310点	
		根面版によるもの	— ▶ 190点	
		レジン充填によるもの	— ▶ 106点	
レジン前装チタン冠(1歯につき)	— ▶ 1,800点			
非金属歯冠修復(1歯につき) レジンインレー	単純なもの	124点 ▶ 128点		
CAD/CAM冠(臼歯に対して外れる 前歯も認められる)	複雑なもの	176点 ▶ 180点		
	1,200点 ▶ 1,200点			
	CAD/CAMインレー(1歯につき) 臼歯に対して歯冠補綴物(全部被覆冠に限る)	— ▶ 750点		
	高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき)	2,500点 ▶ 2,600点		
	有床義歯 局部義歯(1床につき)	1歯から4歯まで 588点 ▶ 594点		
	5歯から8歯まで 724点 ▶ 732点			
	9歯から11歯まで 962点 ▶ 972点			
	12歯から14歯まで 1,391点 ▶ 1,402点			
	総義歯(1顎につき)	2,172点 ▶ 2,184点		
	熱可塑性樹脂有床義歯 局部義歯(1床につき)	1歯から4歯まで 642点 ▶ 630点		
5歯から8歯まで 866点 ▶ 852点				
9歯から11歯まで 1,080点 ▶ 1,064点				
12歯から14歯まで 1,696点 ▶ 1,678点				
総義歯(1顎につき)	2,704点 ▶ 2,682点			
磁性アタッチメント(1歯につき)	磁性構造体を用いる場合	— ▶ 260点		
	キーパー付き根面版を用いる場合	— ▶ 350点		
間接支台装置(1個につき)	109点 ▶ 111点			
有床義歯修理(1床につき)	252点 ▶ 260点			

基本診療料

オンライン資格確認対応端末 G558/F (当社レセプトカルテシステム用)

富士通株式会社
標準価格 198,000円 102832750
*ディスプレイは別売です。



オンライン資格確認パック 基本設定料込 VM-6 (当社以外レセプトカルテシステム用)

NEC株式会社
標準価格 330,000円 102832738



オンライン資格確認については、こちらをご確認ください。

医学管理料等

DENT.Check-Up standard マイルドビュアミント マイルドシトラスミント

ライオン歯科材株式会社
少量洗口・フッ素の滞留性に優れたう蝕予防歯磨剤です。
注:フッ化物高濃度配合品(1450ppmF)の6才未満への使用は控え、子どもの手の届かない場所に保管してください。
標準価格 各480円
マイルドビュアミント 205060784
マイルドシトラスミント 205060785
患者希望価格(税別) 各600円



DENT.Check-Up gel ミント 1450ppm F

ライオン歯科材株式会社
フッ素が口腔内に広がりやすく、研磨材無配合のソフトジェルです。
標準価格 500円 205060781
患者希望価格(税別) 630円



DENT.Check-Up フッ化ナトリウム 洗口液 0.1%【ライオン】

医療用医薬品 | フッ化物洗口剤
ライオン歯科材株式会社
調整する手間のいらぬ既調整タイプです。低清涼感でさわやかなシトラスベルガモット香味で、刺激を抑えたマイルドな使用感です。
標準価格 5,100円 205060706
承認番号 22200AMX00342000



チューイング ブラシ 子ども用柄付

チューイング ブラシ 大人用柄付
(株)藤原歯科産業
繰り返し噛むことにより口の中全体に力が加わり、顎骨や口輪筋、咀嚼筋の発育を助け、口の周囲の筋肉の正常な発達を促します。材質には汚れが付きにくく、また汚れが落ちやすい耐久性に優れた柔らかいシリコンゴムを採用しています。
標準価格 1,720円 201040300 ~ 201040303
患者希望価格(税別) 1,950円



ポスカF

江崎グリコ株式会社
水溶性「カルシウム」と「フッ素」がWで配合!
かむたびに、カルシウムとフッ素(フッ化物)イオンがお口に広がるガムです。
標準価格 各650円
ペパーミント 202400801
マスカット 202400802
ストロベリー 202400803
患者向け価格(税別) 各750円



フロー・サイナスケア スターターキット

洗浄液は、人体に近い濃度なので鼻への刺激が非常に少なく、大人から子どもまで誰でも簡単に短時間で使用できます。

内容物 洗浄用ボトル+洗浄剤(粉)12包
標準価格(1箱) 900円 202600110
希望患者価格(1箱) 1,000円(税別)



販売名 フロー・サイナスケア
一般的名称 鼻用洗浄液
医療機器の分類 一般医療機器(クラスⅠ)
医療機器届出番号 2781X00118000014
総販売元/連絡先 大塚株式会社
製造販売 有限会社ウイルデント

ミニスター S scan II

マウスガードだけでなくスプリント、いびき防止装置など様々なオーラルプライアンスの製作に高い形成圧と加熱・加圧・冷却時間までを自動設定するスキャン機能搭載の加圧形成器です。

標準価格 398,000円 206360600

販売名 ミニスターS scan II
一般的名称 歯科技工成型器
医療機器届出番号 2781X00109000325
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社 モリタ



在宅医療・周術期医療・リハビリテーション


ポータキューブ+
ポータキューブ+SV

軽い、簡単、快適

ポータキューブ+はチェアユニットと共通のハンドピースを搭載した All in One の訪問診療用ポータブルユニット。
訪問先でも普段と変わらない診療が行える、静かで十分な吸引力を持つポータキューブ+(標準吸引タイプ)に加え、より強力でチェアユニットと同等の吸引力を持つポータキューブ+SV(高吸引タイプ)をラインナップ。
便利なLEDライト付きハンドピースも搭載。様々な機能により、快適な訪問診療をサポートします。

標準価格 ポータキューブ+ 980,000円 100800028
ポータキューブ+SV 1,100,000円 100800029

販売名 ポータキューブ+
一般的名称 可搬式歯科用ユニット
医療機器認証番号 301ACBZX00009000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所

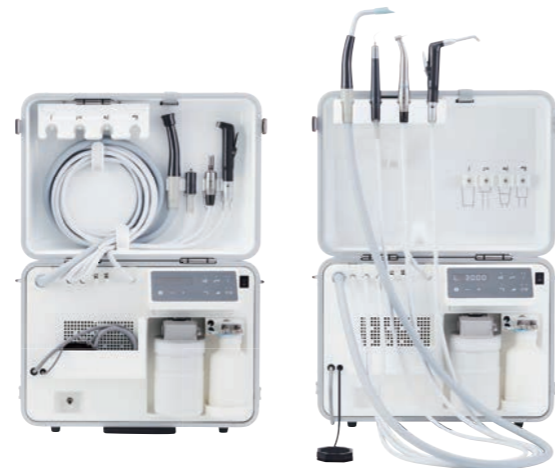

ユーティリオII

コンプレッサー、モーター、給排水装置を内蔵しコンセントひとつで診療が開始できるオールインワンモデル可搬式歯科用ユニット「ユーティリオII」は、エアーを供給するコンプレッサーと吸引を行うためのバキュームモーター、給水タンクと汚水タンクを本体内にすべて内蔵。
ユーティリオIIを配置した瞬間、その場所が診療空間へと変わります。

標準価格 2,100,000円～ 100952000

販売名 ユーティリオII
一般的名称 可搬式歯科用ユニット
医療機器認証番号 226AKBZX00170000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所



ポートエックスIII

軽量、コンパクトで手軽に持ち運べるX線装置です。
シンプルな操作パネル、ディスプレイ表示で撮影設定も簡単です。
イメージングプレートやCCDセンサーのようなデジタルセンサーでも、デンタルフィルムでも対応。
大容量バッテリー内蔵で連続照射可能。
(最低5秒間隔を空けてください)
必要な機能に絞り、シンプルな設計です。

標準価格 480,000円 206240100

販売名 ポートエックスIII
一般的名称 アナログ式口外用歯科X線診断装置
医療機器認証番号 226ACBZX00045000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ



ソルフィー F

使いやすさを追求したデザインと多様な機能を併せ持つ超音波スケーラー ソルフィー F はスケーリング、ペリオ分野での使用はもちろん、内蔵された根管長測定機能との運動によりエンド分野での使用を大きくサポートします。また、ワイドレンジのパワーと豊富なチップラインナップにより、さまざまな臨床に対応し、効率的な治療を実現します。

標準価格
ソルフィー F 248,000円 201070903
ソルフィー F ライト付き 288,000円 201070904
ソルフィー F ボトル、ライト付き 358,000円 201070905

販売名 ソルフィー F
一般的名称 歯科用多目的超音波治療器
医療機器認証番号 224ACBZX00016000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所



ソルフィー



ソルフィー F ボトル、ライト付き

エアフローハンディ 3.0 Plus
エアフローハンディ 3.0

縁上の歯面清掃はもちろん、歯肉縁下のバイオフィルムまで除去することを可能にした歯面清掃用器具です。



エアフローハンディ 3.0 Plus



エアフローハンディ 3.0

標準価格
エアフローハンディ 3.0 Plus 215,000円 206270031～206270038
エアフローハンディ 3.0 189,000円 206270021～206270028

販売名 エアフロー ハンディ3.0
一般的名称 電動型機器接続歯面清掃用器具
医療機器認証番号 229AFBZ100002000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ

在宅医療・周術期医療・リハビリテーション

ソニックアー

プロテクトクリーン4700 プロフェッショナル



毎分約31,000回の高速振動
音波水流とブラッシングのW効果で歯垢を落とす

お悩みに合わせたテーラーメイド電動歯ブラシ

ソニックアーは、歯科医師・歯科衛生士の皆様が、患者さんの口腔内状況を見た上で、患者さんの要望も聞き入れつつ専門的な立場でふさわしいブラシヘッドとブラッシングモードを選んでいただくことができます。
まさに専門家によるテーラーメイド (大切な患者さんのため特別に仕立てた製品) です。

参考医院価格 8,980円(税別) 202550007

参考患者価格 9,980円(税別)

付属品 充電器・プレミアムガムケアブラシヘッド1本
輸入元 株式会社フィリップス・ジャパン

ジェントルスティム

痛みの少ない干渉波刺激が神経に作用し、摂食嚥下障害に対するリハビリテーションをサポートします。充電式で持ち運びやすく、シンプルな操作で電流の強さを調整できるため、どこでもすぐに治療ができます。



標準価格 本体セット 300,000円 202740001

別売品
ゲルパッド電極3パック 2,550円 202740005
ゲルパッド電極30パック 25,500円 202740006
ゲルパッド電極押さえシート3パック 1,350円 202740010
ゲルパッド電極押さえシート30パック 13,500円 202740011
ジェントルスティム キャリングケース 6,000円 202740020

販売名 ジェントルスティム
一般的名称 干渉電流型低周波治療器
医療機器認証番号 227AHBZX00026000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社フードケア

画像診断

Veraview X800

New Frontier of the X-ray

ベラビュー X800は、CT撮影に加えパノラマ/セファロ撮影を1台で可能にした All-in-oneタイプのX線診断装置。高解像度、ボクセルサイズ80μmのCT撮影を実現。CT撮影は、水平にX線を照射することで、アーチファクトの少ない画像を取得できます。さらに、高精細な360度CT撮影モードとハイスピードで低照射線量の180度CT撮影モードを搭載し、診断目的に合わせた撮影を行うことができます。

標準価格 9,600,000円～ 100903030～100903080

販売名 ベラビュー X800
一般的名称 デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
医療機器認証番号 228ACBZX00008000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所



処置

JIZAI

高い耐破断性と柔軟性を有する
NiTiロータリーファイル

標準価格 各5,400円 202490376～202490374
基本キット3本 (21mm、25mm)
単品 各3本入 04(#25～#50)、06(#25～#35)、
オリフィスオープナー #25.14

販売名 マニー® NiTiファイル
一般的名称 電動式歯科用ファイル
医療機器認証番号 301ABBZ00035000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 マニー株式会社



JIZAI Pre013

JIZAIを用いた根管拡大をよりスムーズに行える
グライドパス用NiTiファイル

#13 .04の規格を有し従来の#15 .02ファイルでグライドパスを行うより
後にJIZAI I (#25 .04)が入りやすい。
JIZAIの滑らかな操作感に加え、効率よく切削を行えるマニー(株)独自の
断面形状です。
強テーパーを有してもグライドパスができるよう適切な熱処理加工が施
されています。

標準価格 各5,400円 21mm 202490375、25mm 202490376

販売名 マニー® NiTiファイル
一般的名称 電動式歯科用ファイル
医療機器認証番号 301ABBZ00035000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 マニー株式会社



エンドウェーブ アソートキット アソートキットA(基本セット) アソートキットB(狭窄根管用)

ファイル断面は鋭利な三角形のため、スピーディな根管拡大
形成が可能です。
ファイルに過度なトルクがかかりにくく、根尖方向への食い
込みや破折が生じにくくなっています。
柔軟で根管追従性があり、またファイル先端に丸みを持たせ
ているため、根管・根尖孔の偏移、破壊が起こりにくくなっ
ています。



アソートキットA
(基本セット)

アソートキットB
(狭窄根管用)

標準価格
アソートキットA(基本セット) 7,000円 206380001、206380002
アソートキットB(狭窄根管用) 7,000円 206380010、206380011

エンドウェーブMGPキット

エンドウェーブシリーズ02テーパーのNi-Tiファイル。
#10、#15、#20の3本組メカニカルグライドパス用
ファイルキット。
柔軟性に優れ、特に#15、#20のファイルでも複雑な
根管形態に追従しやすくなっています。
*使用は単回使用をお勧めします。

標準価格 4,100円 206380015

販売名 エンドウェーブ
一般的名称 電動式歯科用ファイル
医療機器認証番号 228AKBZ00059000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ



Tri Auto ZX2

穿通、グライドパス、根管形成をモーターで
トライオートZX2は、コードレスでコンパクトなボディに根管長測定
機能を搭載。熟練した術者の手指の細やかな動きを再現し、これ1台
で穿通・グライドパスを含む根管拡大形成を根管長測定機能との連
動により、より速く行うことが可能です。* *当社従来品との比較。

標準価格 220,000円 201070514

販売名 トライオートZX2
一般的名称 歯科多目的治療用モータ
医療機器認証番号 228AHBZ00040000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所



ルートZX3

機能追加型の根管治療機器です。基本機能である根管長測定
機能は使いやすいさと精度を追求し、より快適なエンド治療の実
現に貢献します。高周波モジュールを追加することでHigh
Frequency Conditon(高周波通電)機能を実現。歯髄の焼灼、
根管内外の感染組織や汚染物質の焼灼が行え、歯肉切除用の
モードを選択することで、電気メスとしても使用可能です。

標準価格
根管長測定モジュール 110,000円 201070633
高周波モジュール 239,000円 201070634

販売名 ルートZX3
一般的名称 歯科用根管長測定器(一般の電気手術器)
医療機器認証番号 302ACBZ00019000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所




マイクロモータートルックスSS(TR-SS-R*)+ トルクテックエンド用減速コントラ(CA-10RC-ENDO)

*TR-SS-Rのみ根管長測定機能に対応可能です。



ソアリック、スペースラインEX、シグノT500対応のオプションです。

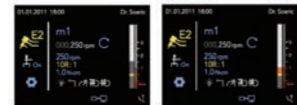

ソアリックシステムディスプレイに表示した例

根管長測定機能に対応したマイクロモータートルックスSS(TR-SS-R*)は、100rpm～40,000rpmの幅広い回転域
により一本のマイクロモーターで、通常の使用方法から根管拡大まで可能です。トルクテックエンド用減速コン
トラ(CA-10RC-ENDO)との組み合わせにより、システムディスプレイで根管内のファイル位置を確認しながら根
管拡大が可能です。ファイル電極をヘッドに内蔵したことで、通電する特定のファイルの交換がいっそう簡単に
なりました。(それ以外のファイルをご使用の場合でも、別途電極を装着することで使用可能となります)

販売名 トルックス
一般的名称 歯科用電気回転駆動装置
医療機器認証番号 229ACBZ00020000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所

デジテストII

デジタル方式で微弱電流が上昇し、生活歯では、
不快感を感じる前にマイルドな刺激が継続します。

標準価格 59,400円 206090010

販売名 デジテストII
一般的名称 電気式歯髄診断器
医療機器認証番号 225AFBZ00100000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ



処置

Veraview X800



New Frontier of the X-ray

ベラビュー X800は、CT撮影に加えパノラマセファロ撮影を1台で可能にした
All-in-oneタイプのX線診断装置。高解像度、ボクセルサイズ80μmのCT撮影を実現。
CT撮影は、水平にX線を照射することで、アーチファクトの少ない画像を取得できま
す。さらに、高精細な360度CT撮影モードとハイスピードで低照射線量の180度CT撮
影モードを搭載し、診断目的に合わせた撮影を行うことができます。

標準価格 9,600,000円～ 100903030～100903080

販売名 ベラビュー X800
一般的名称 デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
医療機器認証番号 228ACBZ00008000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所

Veraviewepocs X700+3D



New Frontier of the X-ray

ベラビュー エボックスX700+ 3Dは、1台でパノラマ撮影、セファロ撮影、CT撮影が
可能です。パノラマ撮影は、AFP(全顎自動焦点補正)機能を搭載し、全域に渡ってフ
ォーカスの合ったくっきりとした読影しやすい画像を提供します。CT撮影は、簡単
な位置付けと操作により、0.40×H40mmの局所領域の撮影から、フルマウス対応の
0100相当×H80mmまで鮮鋭な画像を提供します。さらに洗練された多彩な画像処
理を活用することで、多角的な診断に役立つことが期待できます。

標準価格 9,800,000円～ 100902930～100902970

販売名 ベラビュー エボックス
一般的名称 アナログ式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
医療機器認証番号 20900BZ00259000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所

ライカM320-D

ライカ手術用顕微鏡M320の動画・静止画のクオリティを高めた
FullHDカメラ内蔵タイプ。対物レンズマルチフォーカスは作業長を
200mmから300mmの広範囲でピンと調整が可能です。リモコンの
簡単操作で、動画・静止画をSDカードに記録でき、再生も可能です。
ライブ映像はHDMIコードでモニターへ出力することができます。

標準価格 5,200,000円 202590580

販売名 ライカ M320F12-D
一般的名称 可搬型手術用顕微鏡
医療機器届出番号 13B2X10268320FD1
医療機器の分類 クラスI 一般医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 ライカマイクロスシステムズ株式会社

*フロアスタンド対応の他 床固定タイプ、天井懸架タイプ、
壁掛けタイプ、ユニットマウントタイプがあります。



ルナビューショット

標準価格 850,000円(後付け変更時)
398,000円(新規オプション選択時) 101351575

販売名 ルナビューショット
一般的名称 歯科用口腔内カメラ、手術用顕微鏡、可搬型手術用顕微鏡
医療機器届出番号 11B2X00071000042
医療機器の分類 クラスI 一般医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ東京製作所

[保険適用機器]手術用顕微鏡として保険適用可能

*歯科用3次元エックス線断層撮影装置及びルナビューショットを
使用し根管治療を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、
400点を所定点数に加算
*算定には施設基準の届出が必要です。



ソルフィーF

標準価格 ソルフィーF 248,000円 201070903
ソルフィーF ライト付き 288,000円 201070904
ソルフィーF ボトル、ライト付き 358,000円 201070905

販売名 ソルフィーF
一般的名称 歯科用多目的超音波治療器
医療機器認証番号 224ACBZ00016000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所



超音波用エンドファイル シングル

標準価格 3,850円 202490060

販売名 ダイアファイル
一般的名称 電動式歯科用ファイル
医療機器認証番号 22000BZ01628000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所

超音波用エンドファイル ダブル

標準価格 3,850円 202490061

処置

Dファイnder

DファイnderのD型断面形状は、刃部強度を高めるだけでなく、石灰化により狭窄した根管、強湾曲根管において、過剰な切削、食い込みを防ぐ特性を有しています。



標準価格 21mm 6本入 2,800円 202390410
25mm 6本入 2,800円 202390411

形態 #8、#10、#12、#15

販売名 マニードファイnder
一般的名称 歯科用ファイル
医療機器届出番号 09B1X0006011050
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 マニー株式会社

スーパーファイルMGPキット

マニー社エンジン用02テーパーのステンレススチールファイル。#10…4本、#15…2本のメカニカルグライドバス用6本入りファイルキット。切削効率がよく、特に#10は柔軟性にも優れています。*使用は原則として単回使用を厳守してください。



標準価格 2,650円 202390140(18mm、21mm、25mm)

販売名 マニースーパーファイル
一般的名称 電動式歯科用ファイル
医療機器届出番号 2200052X01626000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
製造販売 マニー株式会社

GPリムーバー スピアー(ポイント式)



鈎状の先端形状によりガッタパーチャポイント等根管充填材を効率よく、除去できます。

マイクロスコープ使用時はφ0.3~0.5mm
ルーペまたは裸眼時はφ0.7mmを推奨します。

※目視できる範囲にのみ有効です。

標準価格 3,300円 201510215

シングル 0.3S/φ0.3×21mm、0.3L/φ0.3×28mm
ダブル 0.5S/φ0.5×21mm、0.5L/φ0.5×28mm、0.7S/φ0.7×21mm、0.7L/φ0.7×28mm

販売名 GPリムーバー スピアー
一般的名称 歯科用起子及び剥離子
医療機器届出番号 11B1X1000642D032
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社YDM

クリーン・ウォッシングニードル

使用部位に合わせて選べるサイズバリエーション。針管の先端部を閉鎖し、先端近くの2つの側孔より薬液を噴出させ注入圧を分散させることができます。歯周ポケットや根尖部の組織を傷つけないよう、先端を丸く処置しています。



標準価格
ソフトタイプ 4,000円 205150030~035
ハードタイプ 12,000円 205150036

販売名 クリーン・ウォッシングニードル
一般的名称 洗浄用注入用具
医療機器届出番号 27B1X00045000009
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 コプロ株式会社

メタシール Soft ペースト

接着性を有したレジン系根管充填用シーラーです。ガッタパーチャポイントとも接着し、根管象牙質からガッタパーチャポイントまでを一体化させたモノブロック構造で根管内に緊密に接着封鎖し、細菌の侵入を抑制します。



標準価格 9,300円 204610476

販売名 メタシールSoft ペースト
一般的名称 歯科用根管充填シーラー
医療機器届出番号 301AKBZX00045000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
製造販売 サンメディカル株式会社

デュオペン

ガッタパーチャを即座に溶解し、根尖部までしっかり封鎖するための電熱式根管プラグです。



標準価格 138,000円 206300400

販売名 デュオペン
一般的名称 電熱式根管プラグ
医療機器届出番号 231AFBZX00029000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ

デュオガン

ガッタパーチャに流動性を持たせることにより、緊密な充填が行える電気加熱注入器です。



標準価格 138,000円 206300300

販売名 デュオガン
一般的名称 歯科根管材料電気加熱注入器
医療機器届出番号 231AFBZX00029000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ

インレークラウンリムーバー

ポイントがワンタッチで着脱できます。

ポイントの突起部をタテ溝に沿って挿入し、回転させて固定します。



標準価格 10,800円 201010014

販売名 インレークラウンリムーバーセット
一般的名称 歯科用起子及び剥離子
医療機器届出番号 11B1X1000642D023
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社YDM

オートマチッククラウンリムーバー セット

ハンドルを片手で握るだけで振動を与えられるので、もう片方の手を先端に添えることができます。振動の強弱の調整が可能です。向きでも下向きでも、同様の振動を与えることができます。



標準価格 40,000円 201010006

販売名 オートマチッククラウンリムーバーセット
一般的名称 歯科用起子及び剥離子
医療機器届出番号 11B1X1000642D025
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社YDM

処置

エアフローハンディ 3.0 Plus エアフローハンディ 3.0

緑上の歯面清掃はもちろん、歯肉縁下のバイオフィルムまで除去することを可能にした歯面清掃用器具です。



標準価格
エアフローハンディ 3.0 Plus 215,000円 206270031~206270038
エアフローハンディ 3.0 189,000円 206270021~206270028

販売名 エアフローハンディ3.0
一般的名称 電動型機器接続歯面清掃用器具
医療機器届出番号 229AFBZX00002000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
選任製造販売 株式会社モリタ



エアフローハンディ 3.0 Plus

エアフローハンディ 3.0

マイクロマックスブライト

コードの制限から解放され、場所を選ばずにPMTCが可能です。取り外し可能なLEDライトモジュールは口腔内を奥までしっかり照らし、さらに高トルクにより低速回転でも高い清掃力を実現しました。



標準価格 132,000円
ラッチタイプ 206070001
スクリュウタイプ 206070002

販売名 マイクロマックスブライト
一般的名称 歯科用電動式ハンドピース
医療機器届出番号 230AFBZX000062000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ

トルクテック プロフィーコントラ

PMTC用のカップやブラシを使用して、PMTC作業を行うことができます。研磨ペーストの侵入を防止する防塵ゴム、さらにはスラスト玉軸受を採用し、軸方向の押し付けに対する耐久性を向上させています。



標準価格 68,000円 202600034

販売名 トルクテック
一般的名称 ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器届出番号 11B1X1000664D003
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所

LUNOSプロフィーペースト 2in1 RDA値 28

歯面にペーストを塗布し10秒以上研磨します。ペースト内の棒状粒子(珪灰石)が時間をかけて、細かく砕けていくことでステイン除去から歯面の滑沢化までを行い、1本で効率良くクリーニングが可能です。



ニュートラル
(無香料)

オレンジ

フッ素
1500ppm
配合

ミント

種類 ニュートラル/オレンジ/ミント
内容量 100g RDA値 28

標準価格 4,000円 ニュートラル 206430001
オレンジ 206430002
ミント 206430003

販売名 LUNOSプロフィーペースト
一般的名称 歯面研磨材
医療機器届出番号 27B1X00109000340
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社モリタ

LUNOSプロフィーペースト スーパーソフト RDA値 5

天然歯の清掃、仕上げ研磨だけではなく、補綴物にも対応しています。配合されているハイドロキシアパタイトにより、滑沢でつやのある歯面にすることで、プラークやステインが再付着しにくくなります。



ニュートラル
(無香料)

オレンジ

種類 ニュートラル/オレンジ
内容量 50g RDA値 5

標準価格 2,600円 ニュートラル 206430004
オレンジ 206430005

販売名 LUNOSプロフィーペースト
一般的名称 歯面研磨材
医療機器届出番号 27B1X00109000340
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社モリタ

手術

抜歯鉗子 各種

精度と耐久性に優れています。
柄の内部に使用部位が明記されています。

標準価格 18,900円～ 2010102151～



抜歯鉗子 Claw 各種

4ヶ所の爪が力学的にバランスがとれた状態で歯を保持し、さらに内面ギザのスパイク効果で保持力を高めてつかめます。
ハンドル部のバネにより先端の開閉をコントロールできる為、歯頸部へ容易に適合できます。

標準価格 19,800円～ 201010220～



販売名 抜歯鉗子
一般的名称 抜歯用鉗子
医療機器届出番号 11B1X1000639D301
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社YDM

エレベーター 各種

標準価格 8,700円～ 201010231～

販売名 エレベーター
一般的名称 歯科用エレベーター
医療機器届出番号 11B1X1000645D004
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社YDM



粘膜剥離子 各種

標準価格 9,700円～ 201010278～


販売名 粘膜剥離子
一般的名称 歯科用起子及び剥離子
医療機器届出番号 11B1X1000642D013
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社YDM



替刃メス 各種

標準価格 1,000円 20211015010～

販売名 フェザー替刃メス
一般的名称 単回使用メス用刃
医療機器届出番号 218AABZK00123000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
製造販売 フェザー安全剃刀株式会社

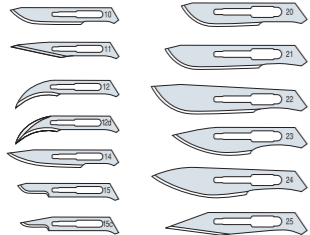

持針器 カストロビージョー 新型(超便付) 各種

※サイズ/ 170mm
※指定適合糸/ 3-0 ～ 5-0

標準価格 30,300円 201510939～

販売名 持針器 カストロビージョー
一般的名称 持針器
医療機器届出番号 11B1X1000630D003
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社YDM



鋭匙 各種

標準価格 8,500円～ 201510596～

販売名 鋭匙
一般的名称 歯科用キュレット
医療機器届出番号 11B1X1000662D002
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社YDM



替刃メスハンドル

替刃メス#10、#11、#12、#12d、#14、#15、#15C、#15Sが装着できます。

標準価格 10,300円～ 201010685

販売名 替刃メスハンドル
一般的名称 タイフハンドル
医療機器届出番号 11B1X1000634D001
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社YDM



替刃メス10枚入り(マイクロ用) 各種

マイクロスコプを用いた微細な手術に有効なマイクロメスです。替刃メスハンドルNo.3、7、DF-160S-3に装着が可能です。

標準価格 12,000円 202110170～

販売名 エザー替刃メス
一般的名称 単回使用メス用刃
医療機器届出番号 218AABZK00123000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
製造販売 フェザー安全剃刀株式会社



歯肉バサミ 各種

標準価格 11,600円 2010102541～

販売名 歯肉バサミ
一般的名称 歯科用歯肉はさみ
医療機器届出番号 11B1X1000635D201
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社YDM



手術

外科ピンセット 各種

標準価格 3,850円～ 201010098～

販売名 外科ピンセット
一般的名称 ピンセット
医療機器届出番号 11B1X1000636D011
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社YDM



アーウィン アドベール EVO

痛みと振動が少なく人にやさしいレーザー Er:YAGレーザー装置。歯科治療の新しい方法として注目されているレーザー治療。モリタの開発したEr:YAGレーザー装置アーウィン アドベールは、レーザー治療に必要な機能をスタイリッシュなボディに集約。さまざまな治療シーンに対応できる多彩なコンタクトチップとフレキシブルな操作性が、患者さんの負担をやわらげ、院内の効率的なレーザー治療を実現します。

標準価格 6,280,000円 102101020

販売名 アーウィン アドベール
一般的名称 エルビウム・ヤグレーザー
医療機器承認番号 215005Z200720000
機器の分類 クラスⅢ 高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所



プログ

切開、切除、凝固などの各処置を効率的に行える45Wの高周波出力です。JIS規格に対応し、適切な治療を行うため、それぞれのモードをLEDランプとブザー音で確認することができます。グリップは手指が疲れにくく、精密なコントロールが可能なデザインです。チップ、ハンドピース部、コード部ともに取り外しができ、オートクレーブ滅菌(滅菌温度135℃/乾燥工程不可)が可能です。



プログ(タテ型)

プログ(ヨコ型)

標準価格
プログ(タテ型) 166,000円 201030260
プログ(ヨコ型) 166,000円 201030250

販売名 プログ
一般的名称 一般的電気手術器
医療機器届出番号 302AGBZK00031000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
製造販売 城田電気材料株式会社

ソニックサージオン 310L

軟組織を傷付けず硬組織のみに作用する、電動式骨手術器械「ソニックサージオン310L」は最大20Wの高い出力を備え、ストレスを感じることなく高い精度の骨手術が可能です。これにより軟組織への損傷などのリスクの軽減と手術時間の短縮を実現します。LEDライト照明が、明るい術野を確保します。

標準価格 750,000円 206780370

販売名 ソニックサージオン 310L
一般的名称 電動式骨手術器械
医療機器届出番号 226AFBZK00003000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ



シロプロ Plus 3rd Gen.外科用ユニット

シロプロプラスは、インプラント機能に口腔外科機能を加えたモーターシステムで、インプラント機能と口腔外科および顎顔面口腔外科用途に開発された製品です。様々なインストルメントとの組み合わせにより、歯周外科および口腔外科治療に対応しています。

標準価格 680,000円 206750251

販売名 シロプロ Plus 3rd Gen. 外科用ユニット
一般的名称 電動式骨手術器械
医療機器届出番号 301AKBZK00010000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
製造販売 ビエン・エア・アジア株式会社



歯冠修復及び欠損補綴

SAルーティング® Multi

オートミックス
標準価格 10,700円 202440212~202440214

ハンドミックス
標準価格 7,700円 202440202~202440204

販売名 SA ルーティング® Multi
一般的名称 歯科接着用レジンセメント
医療機器認証番号 230ABBZX00096000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



クリアフィル® セラミック プライマー プラス

陶材、シリカ系ガラスセラミックス、CAD/CAMレジン、
ジルコニア、金属まで使用可能なプライマー。
1本で様々な補綴物に適用可能です。

標準価格 7,000円 202430637

販売名 クリアフィル® セラミック プライマー プラス
一般的名称 歯科セラミックス用接着材料
医療機器認証番号 226ABBZX00105000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



CAD/CAM冠用材料(Ⅳ) <前歯用> カタナ® アベンシア® N

前歯CAD/CAM冠に対応したシームレスなグラデーションが特長のマルチレイヤーブロック
特定保険医療材料「CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)」(前歯用)に適した製品です。
エナメル色、ボディ色を有し、間に中間色を含む積層構造のブロックです。
独自の製造方法で、エナメル色からボディ色にかけて、彩度と透明度が境目なく
移行的に変化するマルチレイヤーを実現しました。

標準価格 14L A1、A2、A3、A3.5、B1、B2 5入 26,150円 202270729

販売名 カタナ® アベンシア® N
一般的名称 歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号 301AFBZX00015000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) <大臼歯用> カタナ® アベンシア® Pブロック

CAD/CAM冠大臼歯に対応した高強度タイプのブロック

特定保険医療材料「CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)」(大臼歯用)に適した製品です。
機械的強度に優れ「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick ER」、
「SAルーティングMulti」と組み合わせることで優れた接着性を実現します。

標準価格 12 A2LT、A3LT、A3.5LT 5入 24,200円 202270720
14 A2LT、A3LT、A3.5LT 5入 24,200円 202270721

販売名 カタナ® アベンシア® Pブロック
一般的名称 歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号 229AFBZX00091000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) <小臼歯用> カタナ® アベンシア® ブロック2

特定保険医療材料「CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)」(小臼歯用)に適した製品です。
高い滑沢耐久性及び簡便な研磨性を実現しています。
アベンシアシリーズ同様にLT(ロートランス)、OP(オペーク)、ML(マルチレイヤー)を
取り揃えています。

標準価格 12 A2LT、A3LT、A3.5LT 5入 13,500円 202270722
12 A3OP 5入 13,500円 202270723
12 A2 ML、A3 ML、A3.5 ML 5入 13,500円 202270726
14L A2LT、A3LT、A3.5LT 5入 16,500円 202270724
14L A3OP 5入 16,500円 202270725

販売名 カタナ® アベンシア® ブロック2
一般的名称 歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号 302AFBZX00019000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



歯冠修復及び欠損補綴

クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE ボンディングキット

内容 【デンチン】Aペースト 8.9g(4.5mL)Bペースト9.0g(4.5mL)1本/クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ボンド (1mL)1本
【ホワイト】Aペースト 8.9g(4.5mL)Bペースト9.0g(4.5mL)1本/クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ボンド (1mL)1本

付属品 ミキシングチップ 20個/ガイドチップ(太) 10個/ガイドチップ(細) 10個/
アプリケーションブラシ(根管用(黒))50本/遮光板(C)1個/混和皿(C)1個

標準価格 各17,000円 デンチン 202430586 ホワイト 202430587

販売名 クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE ボンディングキット
一般的名称 歯科用支台築造材料キット
医療機器認証番号 228ABBZX00107000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE

オートミックスタイプのデュアルキュア型支台築造用コンポジットレジンです。

内容 Aペースト 8.9g(4.5mL)Bペースト9.0g(4.5mL)1本/ミキシングチップ 20個/
ガイドチップ(太) 10個/ガイドチップ(細) 10個

標準価格 各9,500円 デンチン 202420942 ホワイト 202420943

販売名 クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE
一般的名称 歯科用支台築造材料
医療機器認証番号 228ABBZX00086000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER

標準価格 13,400円 202430583

販売名 クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER
一般的名称 歯科用象牙質接着材料(歯科セラミックス用接着材料)
(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料)
(歯科用シーリング/コーティング材)
医療機器認証番号 228ABBZX00065000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



クリアフィル® AD ファイバーポストⅡ 各種

下顎前歯に対応するNo.2(直径0.84mm)から
No.6(1.64mm)までラインナップ。
症例に応じた選択が可能です。

内容 No.2、No.3、No.4、No.5、No.6 各10本
標準価格 各8,900円 202440240~202440244

販売名 クリアフィル® AD ファイバーポストⅡ
一般的名称 歯科根管用ポスト成形品
医療機器認証番号 301ABBZX00019000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



ポリクラウン 全形態セット ポリクラウン 前歯セット ポリクラウン 単品(10個入)各種

ポリカーボネート樹脂製のテンポラリークラウン。
口腔内の摩擦や咬合圧に対する耐久性に加え、
審美性にもすぐれています。

標準価格
全形態セット 19,700円 204510011
前歯セット 16,000円 204510012
単品(10個入)各種 970円 204510015~

販売名 ポリクラウン
一般的名称 歯科用暫時的冠形成品
医療機器認証番号 221AFBZX00121000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社ニッソン



歯冠修復及び欠損補綴

セシード®N マルチカラースターターセット マルチカラーシステムA3セット

形態保持性のあるデンチンペーストと、伸ばしやすくなじみやすいエナメルペーストにより、気泡混入がより少ない補綴物の製作が可能です。

標準価格
マルチカラースターターセット 43,200円 202430401
マルチカラーシステムA3セット 26,500円 202430402

販売名 セシード®N
一般的名称 歯冠用硬質レジン
医療機器認証番号 225ABBZX00173000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



マルチカラーシステムA3セット



マルチカラースターターセット

スーパーボンド CAD/CAM冠セット

CAD/CAM冠接着に適したスーパーボンドのセット

標準価格 24,800円 204610559

販売名 スーパーボンド
一般的名称 歯科接着用レジンセメント
医療機器認証番号 221AABZX00115000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 サンメディカル株式会社

販売名 ティースプライマー
一般的名称 歯冠処理材
医療機器認証番号 222AFBZX00100000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 サンメディカル株式会社

販売名 スーパーボンド P2プライマー
一般的名称 歯科セラミックス用接着材料
医療機器認証番号 224AFBZX00102000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 サンメディカル株式会社



メタカラー プライムアート スターターキット(ユニバーサル)

反応性有機質複合フィラー「TMPTフィラー」を採用することで優れた操作性と滑沢性、耐摩耗性を実現しました。前装冠はもちろんのこと、「ジャケットオパーク」使用により高強度ジャケット冠の作製も可能とした硬質レジンです。

標準価格 46,500円 204610771

販売名 メタカラー プライムアート
一般的名称 歯冠用硬質レジン
医療機器認証番号 219AABZX00209000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 サンメディカル株式会社



アルフレックス 各種

粉と水のなじみがよく、練りやすく20秒程度で均一なペースト状になるアルジネート印象材です。



標準価格 22,000円 204510200F ~ 204510200N

販売名 アルフレックス ダストフリー
一般的名称 歯科用アルギン酸塩印象材
医療機器認証番号 218AFBZX00089000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社ニッシン

アルフレックスデンチャー

アルフレックスの基本性能はそのままに義歯の1次印象を効率的に採得できるようにしたアルジネート印象材。練和感を損なうことなく練和後の粘度を高めることにより、可動粘膜を押し広げながら印象することができるため、頬側辺縁部を広く高精度に印象採得することができます。



標準価格 5,000円 204510201

販売名 アルフレックス デンチャー
一般的名称 歯科用アルギン酸塩印象材
医療機器認証番号 219AFBZX00051000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社ニッシン

ニューダイヤストーン 各種

各種印象材に対して優れた適合性を示し、表面が滑沢な模型が得られる硬石膏です。また、少ない混水量で練和できます。



標準価格 3,000円 202330001~202330005, 202330030

販売名 ニューダイヤストーン
一般的名称 歯科用硬質石膏
医療機器届出番号 2483X00001000002
クラス分類 クラスI 一般医療機器
製造販売 株式会社登化デンタル

歯冠修復及び欠損補綴

デュラクロスフィジオ 各種

高い審美性と機能性を併せ持つ硬質レジン歯。エナメル部に反応性有機質複合フィラーを使用することにより耐着色性、耐摩耗性、硬度を向上し口腔内での着色の心配も軽減します。

標準価格 24,960円 204530001 ~ 204530220

販売名 デュラクロス
一般的名称 硬質レジン歯
医療機器認証番号 220AFBZX00068000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社ニッシン



JMシリコン パテ

JMシリコン レギュラー・インジェクション

JMシリコンカーリッジ レギュラータイプ・インジェクションタイプ

操作性に優れ、口腔内でシャープに硬化する親水性付加型シリコン印象材で、用途に合わせて選択することができます。パテタイプは手指にべたつかず、伸びが良く、適度なコシがあるため練和が容易に行えます。また、レギュラータイプとインジェクションタイプは優れた親水性を有し、口腔内の細部まで精密な印象採得が行え、石膏泥に対する濡れ性に優れているため気泡のない滑沢で緻密な模型が得られます。

標準価格 パテ 7,800円 204510060

販売名 JMシリコン パテ
一般的名称 歯科用シリコン印象材
医療機器認証番号 220AFBZX00052000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社ニッシン

標準価格 JMシリコン レギュラー 7,300円 204510061
インジェクション 5,800円 204510062

販売名 JMシリコン レギュラー
一般的名称 歯科用シリコン印象材
医療機器認証番号 220AFBZX00053000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社ニッシン

販売名 JMシリコン インジェクション
一般的名称 歯科用シリコン印象材
医療機器認証番号 220AFBZX00051000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社ニッシン

フィジオマグネット 各種

磁性アタッチメントは、義歯が鈎歯に与える有害な側方力や回転力を逃します。

標準価格 各10,100円 202350500~202350501

販売名 フィジオマグネット キーバーハウジングパターン セット
一般的名称 歯科用精密磁性アタッチメント
医療機器認証番号 221ACBZX00092A01
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社ケディカ



JMシリコン パテ

JMシリコン カートリッジ

標準価格 JMシリコンカートリッジ レギュラータイプ 5,600円 204510090
インジェクションタイプ 5,600円 204510091

販売名 JMシリコンカートリッジ レギュラー
一般的名称 歯科用シリコン印象材
医療機器認証番号 220AFBZX00050000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社ニッシン

販売名 JMシリコンカートリッジ インジェクション
一般的名称 歯科用シリコン印象材
医療機器認証番号 220AFBZX00049000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社ニッシン

クラリベースキット ノーマル ライブピンク

重合の前後で色調が変化するため、硬化の目安を目視で確認できます。また、塗布した部分の義歯床表面が滑沢になるので、目視で塗布面を確認することができます。硬化性に優れており、余剰部の切削性にも優れています。

標準価格 11,800円 202120780

販売名 クラリベースキット
一般的名称 義歯床用硬質裏装材(義歯床用接着材料)
医療機器認証番号 220ABZX00034000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



フィジオソフトリベース

粘膜にかかる咬合圧を均等なレベルで適正に分散し、デリケートな粘膜を優しく保護する低反発タイプの裏装材です。高い接着強度でアクリル床、ポリカーボネート床、金属床に対応しており、粘膜面の再現性に優れ収縮の少ない材料を採用しているため、適合性に優れた義歯が得られます。

標準価格 12,600円 204530450

販売名 フィジオソフトリベース
一般的名称 義歯床用軟質裏装材
医療機器届出番号 215009ZZ00095000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社ニッシン

